



WWW.ROXOLAN.RU

# Hydromasážní “sprcha Alexejeva” základní informace



Oceněna stříbrnou medailí na  
mezinárodní výstavě vynálezů  
v Norimberku v roce 2005

ООО НПФ “ГИДРИАТИКА”®, РОССИЯ, ПЕНЗА

## Vážený majiteli hydromasážní sprchy Alexejeva,

přejeme Vám pevné zdraví a doufáme, že tento výrobek bude výrazně přispívat k Vaší dobré náladě a celkové osobní pohodě.

### Základní informace

Sprcha Alexejeva byla oceněna stříbrnou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů v roce 2005 a zlatou medailí na XI. Všeuské výstavě tuzemských výrobků „Kupujte Ruské“, v Moskvě v roce 2007. Vyrábí se z vysoce odolného materiálu, který je certifikován Státní sanitárně-epidemiologickou službou Ruské Federace.

Práva na výrobu jsou chráněná patentem a licenční smlouvou. **ZAŘÍZENÍ VYRÁBÍ POUZE VĚDECKO-VÝROBNÍ SPOLEČNOST „ГИДРИАТИКА“**

### Identifikace výrobku

Hydromasážní sprcha Alexejeva je určena k provádění hydromasážních procedur, které jsou doporučovány při řadě onemocnění. Výrobek je určen k použití jak v domácnostech, tak i v léčebných a lázeňských zařízeních. Použití výrobku k hospodářským a výrobním účelům je také možné, avšak pouze při maximálním tlaku vody nepřevyšujícím 7 atm.

### Obsah balení

1. Sprcha Alexejeva v rozloženém stavu (viz obr.1) s nainstalovanou tryskovou mřížkou pro hydrodynamickou masáž s 19 tryskami – 1ks
2. Doplnková trysková mřížka pro hydrodynamickou masáž s 13 tryskami (stejně jako u tryskové mřížky s 19 tryskami), používá se pouze při nízkém tlaku vody ve vodovodním potrubí – 1 ks
3. Doplnková trysková mřížka s 61 tryskami pro hloubkovou masáž svalů a pojivových tkání – 1 ks
4. Těsnění sprchové hadice – 2 ks
5. Masážní sprcha Alexejeva - stručný návod – 1ks

### Technické údaje

- konstrukce trysek – tvar složený z konoidálních ploch
- průměr vstupního otvoru trysek je 5mm a výstupního je 0,6 mm, délka trysek je 14 mm.
- počáteční rychlost paprsků vody je 20 -30 m/s (72 – 108 km/h)
- maximální průtokový koeficient je  $\mu=0,99$

**POZNÁMKA!** Výrobce si vyhrazuje právo na konstruktivní změny, které nezhorší kvalitativní ani provozní ukazatele výrobku.


### Instalace masážní sprchy a výměna tryskových mřížek

Před **instalací** hydromasážní sprchy se ujistěte, že převlečná upevňovací matice je pevně zašroubována. Pro použití masážní sprchy Alexejeva je zapotřebí odšroubovat ze sprchové hadice stávající sprchu a přišroubovat sprchový nástavec sprchy Alexejeva ke sprchové hadici. Pro instalaci na sprchové hadice používané standardně v ČR nebudete potřebovat redukční šroubení dodávané ke každé sprše zdarma. Pro zamezení prosakování vody v místě spojení nástavce se sprchovou hadicí doporučujeme použít těsnění dodávané v komerčním balení. .

Pro **výměnu** tryskových mřížek je potřeba: odšroubovat převlečnou upevňovací matici, vyjmout vsazenou tryskovou mřížku. Mřížku nejlépe a nejrychleji vyjmete tak, že dlaní lehce obejmete sprchovou hlavici a použijte slabý proud vody, kterým se mřížka uvolní a vypadne Vám do dlaně. Nezapomeňte sundat průhledný silikonový těsnicí kroužek z vypadlé tryskové mřížky a nasadit ho na druhou mřížku, kterou chcete ve sprchovém nástavci použít (těsnicí kroužek se nasazuje na vnitřní stranu tryskové mřížky). Někdy se stane, že trysková mřížka vypadne ze sprchy bez průhledného silikonového kroužku, který zůstane ve sprchové hlavici sprchového nástavce. V takovém případě je **ZCELA NEZBYTNÉ**, sprchový kroužek prsty ze sprchové hlavice vyjmout a nasadit na druhou mřížku před jejím umístěním do sprchového nástavce! Nakonec zašroubujte převlečnou upevňovací matici. Postup montáže výrobku je znázorněn na obr.1.

**POZOR!** Nejdříve zapněte na baterii režim sprchování a teprve potom postupně pouštějte vodu. Také doporučujeme vyměnit standardní hadici na polypropylenovou. Předjedete tak hydrodynamickému rázu, který může způsobit i přetržení sprchové hadice.

obr. 1

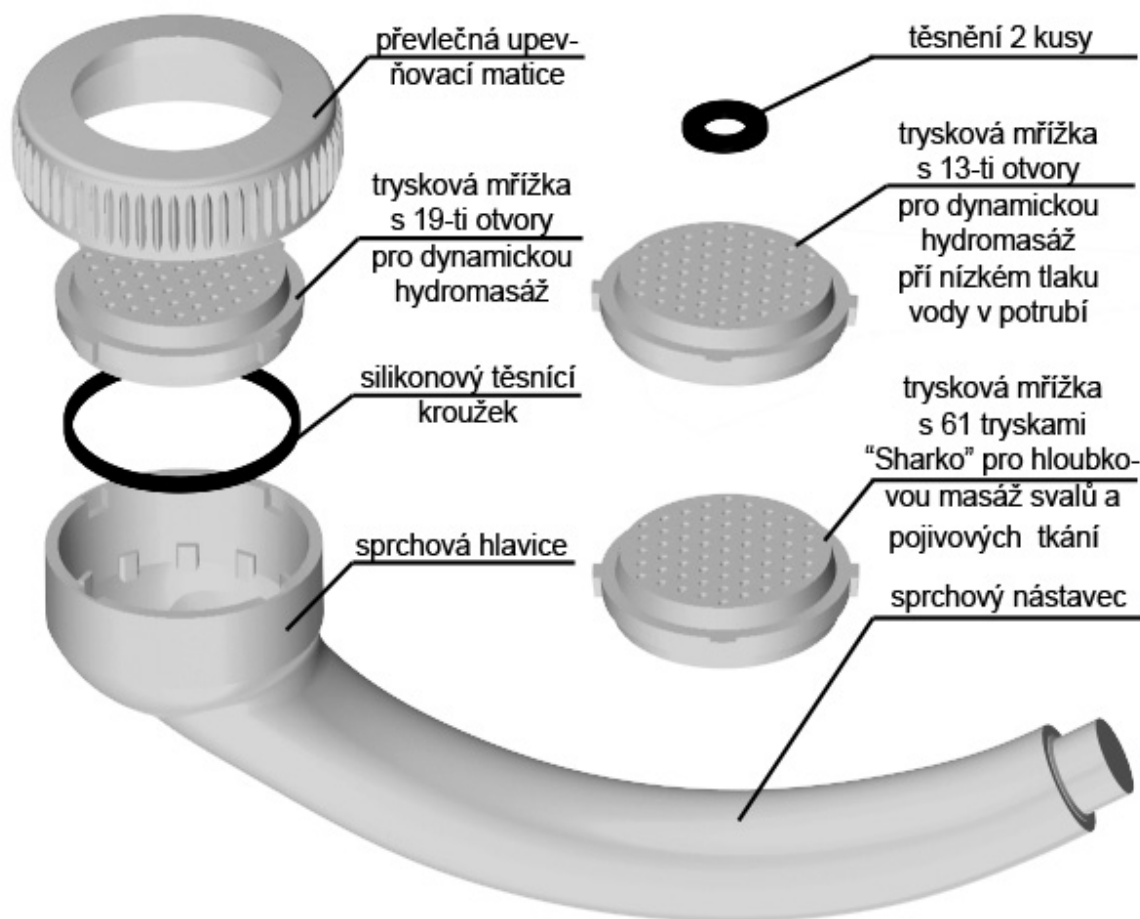

## Záruční podmínky a doporučené postupy používání a údržby

V České republice platí pro sprchu Alexejeva prodloužená záruční doba - 3 roky!

Při vzniku poruchy v záruční době podléhá výměně pouze její nefunkční součást.

Záruka se nevztahuje a prodejce má právo odmítnout opravu či výměnu výrobku v záruční době z následujících důvodů:

1. Přítomnost mechanického poškození.
2. Porucha, která byla zaviněna nesprávným používáním, působením ohně nebo vysokých teplot.
3. Neoprávněné změny v konstrukci výrobku.
4. Použití koncentrovaných chemických látek k čištění některé z částí sprchy

Na bonusy se záruka nevztahuje.

Pro zachování závitů v místě spojení těla hydromasážního nástavce a sprchové hadice doporučujeme použití kovové prodlužovací matice (standardně 1/2"), kterou lze také pořídit v instalátérských potřebách..

Používáním filtru k čištění vody výrazně prodloužíte životnost výrobku.

Při používání sprchového nástavce delší dobu se (zvláště v místech se zvýšenou tvrdostí vody) objeví vápencový sediment. V takovém případě nástavec vyčistěte.. K tomu je potřeba vyjmout tryskovou mřížku a těsnicí kroužek. Následně ponořte tryskovou mřížku zcela na několik hodin do 5-9% roztoku kyseliny octové, případně jiného čisticího prostředku keramických výrobků. Čistěte pouze za studena, nepoužívejte horký ocet! Následně vložte mřížku s těsnícím silikonovým kroužkem zpátky do sprchového nástavce a vypláchněte ji proudem vody. V rámci prevence doporučujeme čištění opakovat periodicky jednou za dva měsíce.

Výrobek se nesmí čistit prostředky s obsahem abrazivních materiálu (písek, pasta nebo prášek s abrazivním obsahem atd.), s obsahem koncentrovaných chemických látek (kyseliny nebo zásady).

Zabraňte kontaktu výrobku s ostrými předměty.

Zabraňte pádu výrobku z výšky.

#### Možné poruchy a způsoby jejich odstranění

	<b>Porucha</b>	<b>Způsob odstranění</b>
1	Prosakování vody v místě spojení převlečné upevňovací matice a sprchového nástavce	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přesvědčte se, zda sprcha byla správně složena (těsnicí kroužek musí být nejprve nasazen na vnitřní stranu destičky s tryskami);</li><li>• Zkontrolujte těsnicí kroužek (obraťte se na dodavatele v případě potřeby výměny)</li></ul>
2	Prosakování vody v místě spojení sprchy se sprchovou hadicí nebo případně nemožnosti spojení.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte těsnění u spojovací matice;</li><li>• Zkontrolujte těsnění u závitu nástavce;</li><li>• Vyměňte / v případě potřeby/ sprchovou hadici;</li><li>• Použijte přechod dodávaný v kompletu</li></ul>
3	Část paprsků stříká jiným směrem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomocí čistícího prostředku odstraňte vápencový sediment na tryskách výměnné mřížky (použití prostředky vhodné k čištění keramických výrobků)</li><li>• Odstranit nečistotu (částici) třepáním nebo tenkou jehlou (průměrem méně než 0,4 mm).</li></ul>

#### **Upozornění:**

Používejte masážní sprchu Alexejeva podle těchto Základních informací a podle příložené brožury. Výrobce i dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku způsobené výrobkem používaným v rozporu s obvyklým použitím sprchovacího zařízení a se zde uvedenými upozorněními a také v rozporu s pokyny a informacemi v příložené brožuře.

Sprcha Alexejeva je vhodná pro každého a při správném používání nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně používání sprchy Alexejeva, obraťte se na svého lékaře!

Bez konzultace s Vaším lékařem neměňte užívání předepsaných léků nebo léčebné postupy!

Pozor na přímé zasažení očí sprchou Alexejeva!

Osoby mladší 18-ti let by měly používat tento produkt pod dohledem dospělé osoby.

V případě dalších dotazů kontaktujte výhradního dovozce pro Českou republiku, společnost CZ BMI, s.r.o.

Tento návod je aktuální v době svého vzniku, vyhrazujeme si právo úpravy stávajícího textu na našich webových stránkách dle získaných aktuálních informací.

Hydromasážní sprcha Alexejeva je vyrobena v souladu se schváleným výkresem a ГОСТ 12271-76.

#### **Výrobce**

„ГИДРИАТИКА,, s.r.o.  
Ruská Federace, 440000 Penza 124  
Tel. (84112) 20-45-46  
Fax. (84112) 20-45-48  
E-mail: [hidriatika@bk.ru](mailto:hidriatika@bk.ru)  
Web: [www.roxolana.ru](http://www.roxolana.ru)

#### **Výhradní dovozce pro ČR a SR**

**CZ BMI, s.r.o.**  
**provozovna:** Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky  
**telefon:** 776241117  
e-mail: [obchod@czbmi.cz](mailto:obchod@czbmi.cz)  
**sídlo:** Slovenská 17, 120 00 Praha 2  
IČ: 26759659, DIC: CZ26759659