

# **7 trysková mřížka "Čištění obličeje"**

(oproti 7 tryskové mřížce pro rázovou vlnu jsou její trysky dále od sebe)

## **základní informace**

**Trysková mřížka "Čištění obličeje"** je další speciální příslušenství hydromasážní sprchy Alexejeva. Sprcha Alexejeva byla oceněna stříbrnou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů v roce 2005.

Práva na výrobu jsou chráněná patentem a licenční smlouvou. **ZAŘÍZENÍ VYRÁBÍ POUZE VĚDECKO-VÝROBNÍ SPOLEČNOST ГИДРИАТИКА.**

## **Identifikace výrobku**

Hydromasážní nástavec sprchy Alexejeva je určen k provádění hydromasážních procedur, které jsou doporučovány při řadě onemocnění. Výrobek je určen k použití jak v domácnostech, tak i v léčebných a lázeňských zařízeních. Použití výrobku k hospodářským a výrobním účelům je také možné, avšak pouze při maximálním tlaku vody nepřevyšujícím 5 atm. Buďte opatrní při nastavování tlaku vody, při příliš vysokém tlaku nelze vyloučit případné poruchy horní matice.

## **Obsah komerčního balení**

1. Doplnková trysková mřížka k hydromasážní sprše Alexejeva se **7 tryskami** – 1ks
2. Těsnění – 1ks
3. Návod

## **Technické údaje**

- konstrukce trysek – tvar složený z konoidálních ploch
- průměr přívodních otvorů - 5mm, výstupní – 1 mm, délka - 14 mm
- počáteční rychlost paprsků vody je 20 -30 m/s (72 – 108 km/h)
- maximální průtokový koeficient je  $\mu=0,99$

Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny, které nezhorší kvalitativní ani provozní ukazatele výrobku.

## Výměna tryskové mřížky

Pro výměnu tryskových mřížek je třeba odšroubovat převlečnou upevňovací matici a vyjmout vsazenou tryskovou mřížku. Mřížku nejlépe a nejrychleji vyjmete tak, že dlaní lehce obejmete sprchovou hlavici a použijete slabý proud vody, kterým se mřížka uvolní a vypadne Vám do dlaně. Nezapomeňte sundat průhledný silikonový těsnicí kroužek z vypadlé tryskové mřížky a nasadit ho na druhou mřížku, kterou chcete ve sprchovém nástavci použít (těsnicí kroužek se nasazuje na vnitřní stranu tryskové mřížky). Někdy se stane, že trysková mřížka vypadne ze sprchy bez průhledného silikonového kroužku, který zůstane ve sprchové hlavici sprchového nástavce. V takovém případě je **ZCELA NEZBYTNÉ** sprchový kroužek prsty ze sprchové hlavice vyjmout a nasadit na druhou mřížku před jejím umístěním do sprchového nástavce! Nakonec zašroubujte převlečnou upevňovací matici.

**POZOR! Nejdříve zapněte na baterii režim sprchování a teprve potom postupně pouštějte vodu. Předejdete tak hydrodynamickému rázu, který může způsobit i přetržení sprchové hadice.**

## NÁVOD NA POUŽITÍ

S pomocí tryskové mřížky „čištění pleti“ můžete provádět účinné čištění obličeje a krku. Jde o jemnější variantu nástavce pro rázovou vlnu.

Během procedury se z povrchu odlupují odumřelé kožní buňky, odstraňují se zánětlivé elementy (komedony), stimuluje se krevní oběh a látková výměna v pokožce, což vede k normalizaci mazových žláz.

Čištění ústí mazových žláz vede ke snížení velikosti pórů. Účinně vyhlazuje pokožku. Snižuje množství zánětů. Čištění tváře touto tryskovou mřížkou vede k odstranění skvrn a jizev po akné.

Při použití této masáže změknou mastné zátky, pokožka se uvolní. S pomocí této tryskové mřížky očistíte pleť maximálně efektivně.

Indikace pro čištění obličeje: • porézní pleť, rozšířené póry na obličeji, • přítomnost komedonů, • uhovitá vyrážka, čištění obličeje s akné • mastná, smíšená, uvadlá pleť • snížený tonus( pružnost) a turgor (napětí) pleti.


**Kontraindikace** k čištění obličeje: vřidkovité onemocnění pokožky obličeje (furunkuly) v akutním stavu, ekzémy, opary, epilepsie.

NEPOUŽÍVEJTE mýdlo a další čisticí prostředky.

U lidí se suchou pokožkou po prvním použití může tato masáž vyvolat zvýšený pocit suché pleti. Je třeba vypít ihned po masáži 2-3 šálky čaje nebo přírodní vody a použít vhodný krém.

Po 5-6 ošetřeních suchá kůže zmizí. A s nárůstem příjmu bílkovin ve stravě se může zlepšit svalová vrstva obličeje, což je nejspolehlivější způsob jak předejít předčasnému stárnutí obličeje.

Čištění by mělo být provedeno ve směru toku lymfy. Nepoužívejte pro masáž nohou, přední stranu krku, hrudníku. Protože se jedná o „měkčí“ variantu tryskové mřížky „rázová vlna“ řiďte se pravidly pro použití této tryskové mřížky. Stiskněte dlaní spodní část tváře, chvíli podržte - okamžitě Vám pomůže uklidnit se a uvolnit svaly.

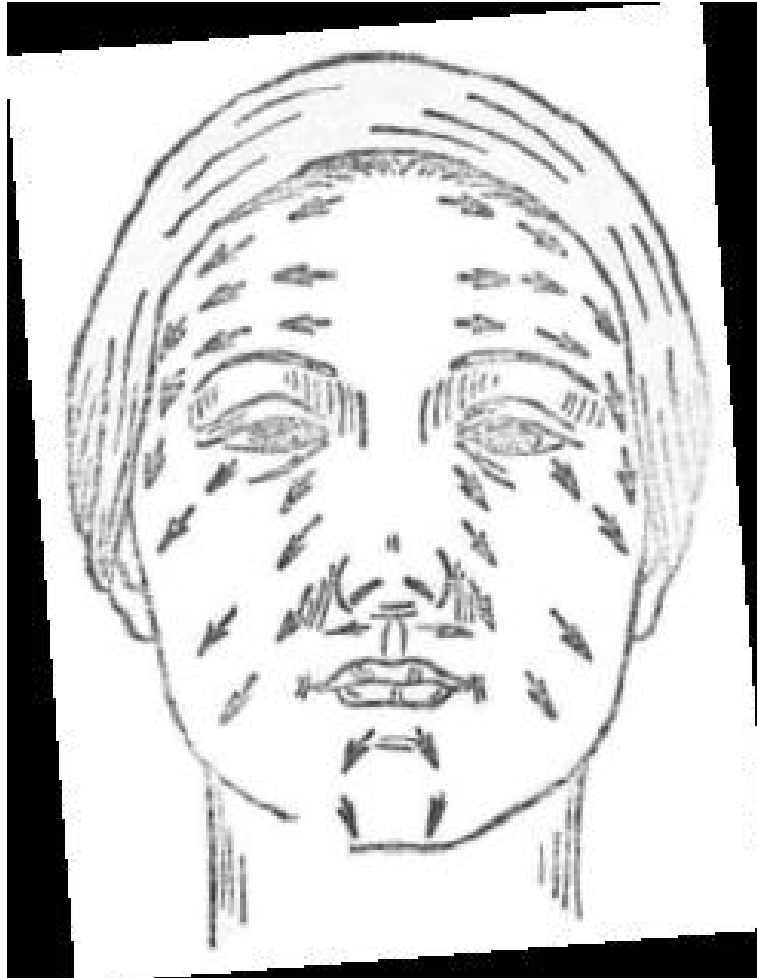

### **Záruční podmínky a doporučené postupy používání a údržby**

V České republice platí pro tryskovou mřížku „lymfomasáž“ prodloužená záruční doba - 3 roky!

Záruka se nevztahuje a prodejce má právo odmítnout opravu či výměnu výrobku v záruční době z následujících důvodů:

1. Přítomnost mechanického poškození.
2. Porucha, která byla zaviněna nesprávným používáním, působením ohně nebo vysokých teplot.
3. Neoprávněné změny v konstrukci výrobku.

4. Použití koncentrovaných chemických látek k čištění některé z částí sprchy

5. Použití tryskové mřížky do jiné sprchové hlavice než sprchy Alexejeva

Používáním filtru k čištění vody výrazně prodloužíte životnost výrobku.

Při používání sprchového nástavce delší dobu se (zvláště v místech se zvýšenou tvrdostí vody) objeví vápencový sediment. V takovém případě nástavec vyčistěte. K tomu je potřeba vyjmout tryskovou mřížku a těsnící kroužek.

Následně ponořte tryskovou mřížku zcela na několik hodin do 5-9% roztoku kyseliny octové, případně jiného čistícího prostředku keramických výrobků.

Následně vložte mřížku s těsnícím silikonovým kroužkem zpátky do sprchového nástavce a vypláchněte ji proudem vody. V rámci prevence doporučujeme čištění opakovat periodicky jednou za dva měsíce.

Výrobek se nesmí čistit prostředky s obsahem abrazivních materiálů (písek, pasta nebo prášek s abrazivním obsahem atd.), s obsahem koncentrovaných chemických látek (kyseliny nebo zásady).

Zabraňte kontaktu výrobku s ostrými předměty.

Zabraňte pádu výrobku z výšky větší než 1 metr.

### **Upozornění:**

Používejte tryskovou mřížku podle výše uvedených instrukcí. Výrobce ani dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku způsobené výrobkem používaným v rozporu s obvyklým použitím sprchovacího zařízení. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně používání sprchy Alexejeva, obraťte se na svého lékaře! Bez konzultace s Vaším lékařem neměňte užívání předepsaných léků nebo léčebné postupy!

Pozor na přímé zasažení očí sprchou Alexejeva!

Osoby mladší 18-ti let by měly používat tento produkt pod dohledem dospělé osoby.

V případě dalších dotazů kontaktujte výhradního dovozce pro Českou republiku, společnost CZ BMI, s.r.o.

Tento návod je aktuální v době svého vzniku, vyhrazujeme si právo úpravy stávajícího textu na našich webových stránkách dle získaných aktuálních informací.

#### **Výrobce**

**„ГИДРИАТИКА,, s.r.o.**

Ruská Federace, 440000 Penza 124

Tel. (84112) 20-45-46

Fax. (84112) 20-45-48

#### **Výhradní dovozce pro ČR a SR**

**CZ BMI, s.r.o.**

**provozovna:** Zámecká 391, 281 21

Červené Pečky

**telefon:** 776241 117

e-mail: info@czbmi.cz

**sídlo:** Slovenská 17, 120 00 Praha 2

IČ: 26759659, DIC: CZ26759659