

# Jedno trysková „mřížka“ "Podvodní masáž"

## Základní informace

**Trysková mřížka "Podvodní masáž"** je další speciální příslušenství hydromasážní sprchy Alexejeva. Sprcha Alexejeva byla oceněna stříbrnou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů v roce 2005.

Práva na výrobu jsou chráněna patentem a licenční smlouvou. **ZAŘÍZENÍ VYRÁBÍ POUZE VĚDECKO-VÝROBNÍ SPOLEČNOST ГИДРИАТИКА.**

## Identifikace výrobku

Hydromasážní nástavec sprchy Alexejeva je určen k provádění hydromasážních procedur, které jsou doporučovány při řadě onemocnění. Výrobek je určen k použití jak v domácnostech, tak i v léčebných a lázeňských zařízeních. Použití výrobku k hospodářským a výrobním účelům je také možné, avšak pouze při maximálním tlaku vody nepřevyšujícím 5 atm. Buďte opatrní při nastavování tlaku vody, při příliš vysokém tlaku nelze vyloučit případné poruchy horní matice.

## Obsah komerčního balení

1. Doplnková trysková mřížka k hydromasážní sprše Alexejeva s **jednou tryskou** – 1ks
2. Těsnění – 1ks
3. Návod

## Technické údaje

- konstrukce trysek – tvar složený z konoidálních ploch
- průměr přívodních otvorů - 21 mm, výstupní - 2,8 mm, délka - 59 mm
- počáteční rychlost paprsků vody je 20 -30 m/s (72 – 108 km/h)
- maximální průtokový koeficient je  $\mu=0,99$

Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny, které nezhorší kvalitativní ani provozní ukazatele výrobku.

## Výměna tryskové mřížky

Pro **výměnu** tryskových mřížek je třeba odšroubovat převlečnou upevňovací matici a vyjmout vsazenou tryskovou mřížku. Mřížku nejlépe a nejrychleji vyjmete tak, že dlaní lehce obejmete sprchovou hlavici a použijete slabý proud vody, kterým se mřížka uvolní a vypadne Vám do dlaně. Nezapomeňte sundat průhledný silikonový těsnící kroužek z vypadlé tryskové mřížky a nasadit ho na druhou mřížku, kterou chcete ve sprchovém nástavci použít (těsnící kroužek se nasazuje na vnitřní stranu tryskové mřížky). Někdy se stane, že trysková mřížka

vypadne ze sprchy bez průhledného silikonového kroužku, který zůstane ve sprchové hlavici sprchového nástavce. V takovém případě je **ZCELA NEZBYTNÉ** sprchový kroužek prsty ze sprchové hlavice vyjmout a nasadit na druhou mřížku před jejím umístěním do sprchového nástavce! Nakonec zašroubujte převlečnou upevňovací matici.

**POZOR! Nejdříve zapněte na baterii režim sprchování a teprve potom postupně pouštějte vodu. Předejdete tak hydrodynamickému rázu, který může způsobit i přetržení sprchové hadice.**

## NÁVOD NA POUŽITÍ

Tato tryska se používá jako doplněk pro sprchování pro ruční podvodní masáže. Metoda ruční podvodní masáže kombinuje účinky termálních lázní a masáží. Teplá koupel uvolňuje svaly, což vám umožní hlouběji působit na tkáň. Podvodní masážní sprcha způsobuje výraznější zarudnutí kůže, zlepšuje cirkulaci krve a lymfy, a tím i výživu tkání, stimuluje metabolismus a podporuje rychlé vstřebávání zánětlivých ložisek.

### Indikace

- po operaci a poranění pohybového aparátu (páteř, klouby, svaly, šlachy);
- při úrazech a onemocnění periferního nervového systému;
- na rány, bércové vředy (v nepřítomnosti tromboflebitidy – zánět povrchových žil);
- při patologickém klimakteriu, při poruše metabolismu lipidů

Různé části těla jsou jinak citlivé na tlak vody, nejvyšším tlakem masírujte končetiny, masáže jiných částí těla provádějte opatrněji. Změnou vzdálenosti od deseti do šedesáti centimetrů mezi tělem a tryskovou mřížkou je možné provádět vibrační hlazení s různou intenzitou.

Tryskovou mřížku udržujte ve vzdálenosti 12-15 cm od těla. Nemasírujte oblast srdce!


Optimální je úhel proudu vody 30-45 ° od povrchu těla, masáž provádějte pomalým pohybem od periferií směrem ke středu. Podvodní masáž používejte denně nebo obden po dobu 15-45 minut.

Doba léčení je 15-30 procedur.

Obecná pravidla klasické masáže jsou následující:

- masáž by neměla působit nepříjemné pocity;
- v místě bolesti (ischias, artritida) by měla být prováděna pouze povrchní masáž;

- masírováný se musí nacházet ve výhodné poloze s maximálně uvolněnými svaly ( proto masírování hydromasážní sprchou Alexejeva s jakoukoli tryskou provádějte vleže nebo vsedě ve vaně);
- masáž provádějte podél lymfatických cest do okolních lymfatických uzlin

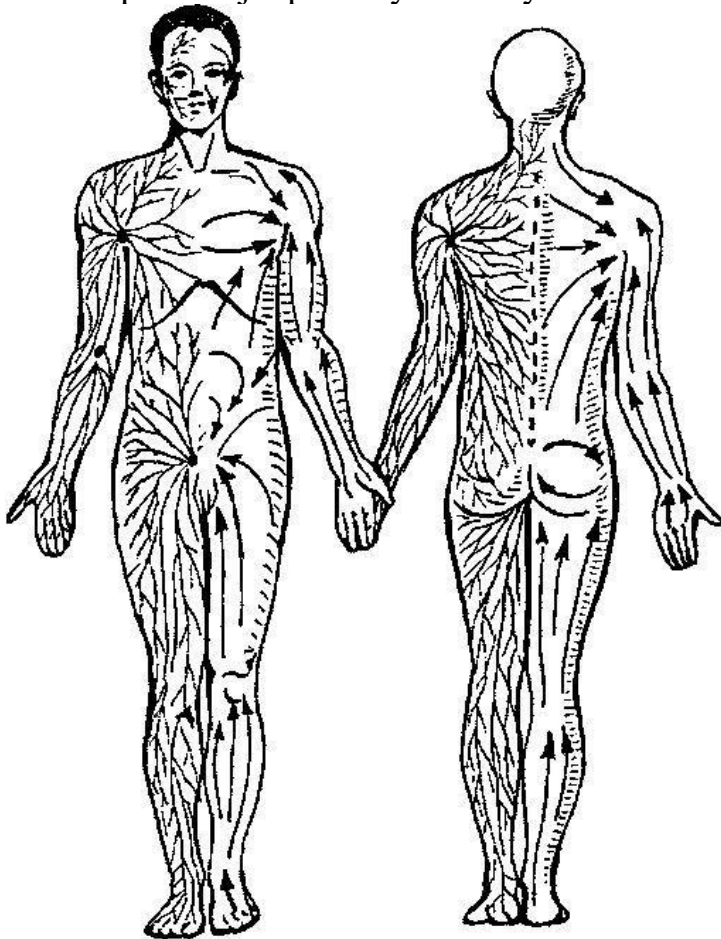

### **Záruční podmínky a doporučené postupy používání a údržby**

V České republice platí pro tryskovou mřížku „podvodní masáž“ prodloužená záruční doba - 3 roky!

Záruka se nevztahuje a prodejce má právo odmítnout opravu či výměnu výrobku v záruční době z následujících důvodů:

1. Přítomnost mechanického poškození.
2. Porucha, která byla zaviněna nesprávným používáním, působením ohně nebo vysokých teplot.
3. Neoprávněné změny v konstrukci výrobku.
4. Použití koncentrovaných chemických látek k čištění některé z částí sprchy
5. Použití tryskové mřížky do jiné sprchové hlavice než sprchy Alexejeva

Používáním filtru k čištění vody výrazně prodloužíte životnost výrobku.

Při používání sprchového nástavce delší dobu se (zvláště v místech se zvýšenou tvrdostí vody) objeví vápencový sediment. V takovém případě nástavec vyčistěte. K tomu je potřeba vyjmout tryskovou mřížku a těsnící kroužek.

Následně ponořte tryskovou mřížku zcela na několik hodin do 5-9% roztoku studené kyseliny octové, případně jiného čisticího prostředku keramických výrobků. Následně vložte mřížku s těsnícím silikonovým kroužkem zpátky do sprchového nástavce a vypláchněte ji proudem vody. V rámci prevence doporučujeme čištění opakovat periodicky jednou za dva měsíce.

Výrobek se nesmí čistit prostředky s obsahem abrazivních materiálů (písek, pasta nebo prášek s abrazivním obsahem atd.), s obsahem koncentrovaných chemických látek (kyseliny nebo zásady).

Zabraňte kontaktu výrobku s ostrými předměty.

Zabraňte pádu výrobku z výšky větší než 1 metr.

### **Upozornění:**

Používejte tryskovou mřížku podle výše uvedených instrukcí. Výrobce ani dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku způsobené výrobkem používaným v rozporu s obvyklým použitím sprchovacího zařízení. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně používání sprchy Alexejeva, obraťte se na svého lékaře! Bez konzultace s Vaším lékařem neměňte užívání předepsaných léků nebo léčebné postupy!

Pozor na přímé zasažení očí sprchou Alexejeva!

Osoby mladší 18-ti let by měly používat tento produkt pod dohledem dospělé osoby.

V případě dalších dotazů kontaktujte výhradního dovozce pro Českou republiku, společnost CZ BMI, s.r.o.

Tento návod je aktuální v době svého vzniku, vyhrazujeme si právo úpravy stávajícího textu na našich webových stránkách dle získaných aktuálních informací.

#### **Výrobce**

**„ГИДРИАТИКА„ s.r.o.**

Ruská Federace, 440000 Penza 124

Tel. (84112) 20-45-46

Fax. (84112) 20-45-48

#### **Výhradní dovozce pro ČR a SR**

**CZ BMI, s.r.o.**

**provozovna:** Zámecká 391, 281 21

Červené Pečky

**telefon:** 776241 117

e-mail: info@czbmi.cz

**sídlo:** Slovenská 17, 120 00 Praha 2

IČ: 26759659, DIC: CZ26759659